



QUICK START GUIDE

All-Turn-It® Spinner

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.



Made with recycled content

To get started:


1. Insert two alkaline C batteries into the battery compartment.
2. Remove the clear plastic disc and arrow.
3. Place the small overlay over the plastic spinner wheel.
4. Replace the arrow and clear plastic disc.
5. Place the large overlay on the device, aligning the three tabs into their corresponding slots.
6. Your devices is now ready to use. Spin the arrow and small overlay by activating the built-in switch or an external switch plugged into the switch jack on the side of the device.



ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

3 Device Overview

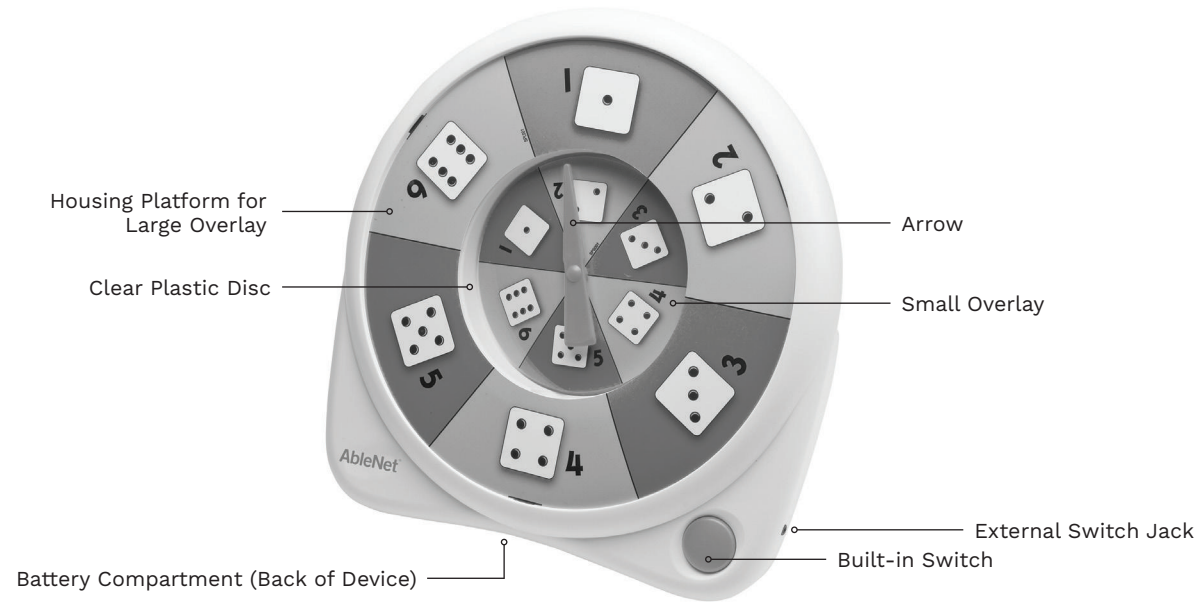

AbleNet®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

All-Turn-It® Spinner

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:51 PM

Mise en route :


1. Insérez deux piles alcalines C dans le compartiment des piles.
2. Enlevez le disque en plastique transparent et la flèche.
3. Placez le petit calque sur la roue de la girouette en plastique.
4. Remettez la flèche et le disque en plastique transparent en place.
5. Placez le grand calque sur l'appareil en alignant les trois onglets sur les fentes correspondantes.
6. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Tournez la flèche et le petit calque en activant le contacteur intégré ou un contacteur externe branché sur la prise de contacteur sur le côté de l'appareil.



ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

3 Vue d'ensemble de l'appareil

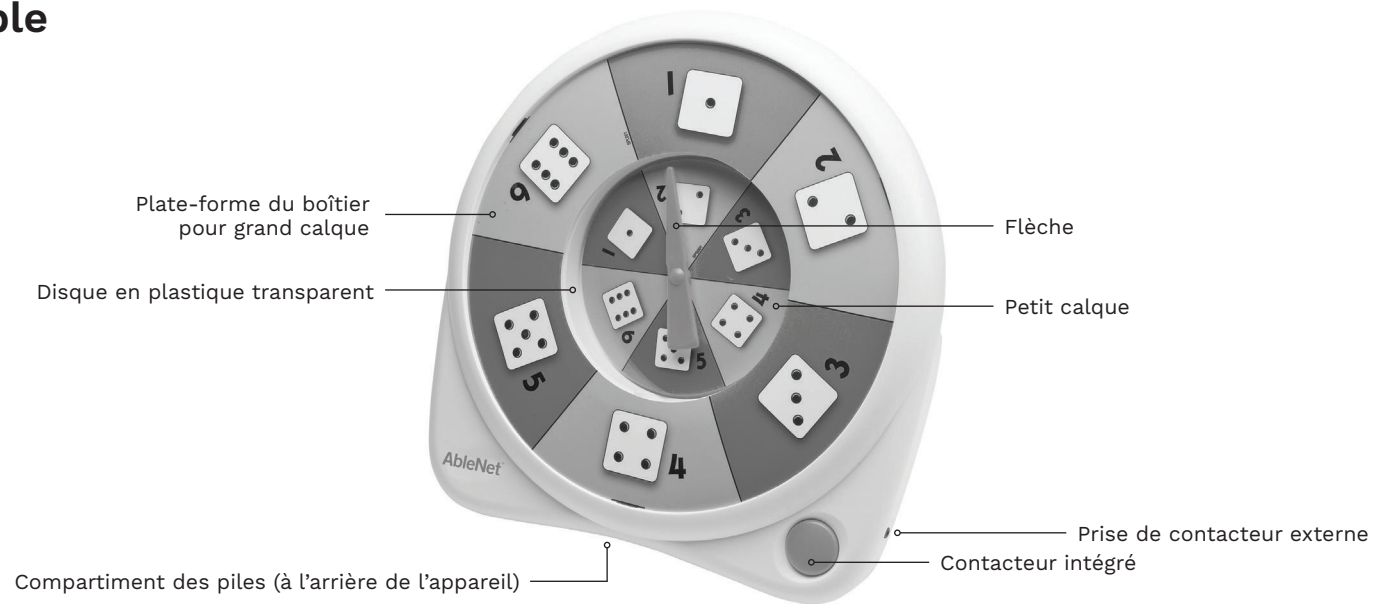



KURZANLEITUNG

All-Turn-It® Spinner

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:51 PM

Erste Schritte:

1. Zwei Alkaline C-Batterien in das Batteriefach einlegen.
2. Die transparente Kunststoffscheibe und den Zeiger abnehmen.
3. Die kleine Schablone auf die Kunststoffdreh Scheibe stecken.
4. Den Zeiger und die durchsichtige Deckscheibe wieder anbringen.
5. Die große Schablone auf dem Gerät anbringen. Dazu die drei Laschen ausrichten und in die entsprechenden Schlitze stecken.
6. Ihre Geräte sind jetzt einsatzbereit. Zum Drehen des Pfeils und der kleinen Schablone drücken Sie den integrierten Taster. Es kann auch ein externer Taster verwendet werden, der an der Buchse an der Seite des Gerätes eingesteckt sein muss.




ableCARE™

Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

3

Geräteübersicht

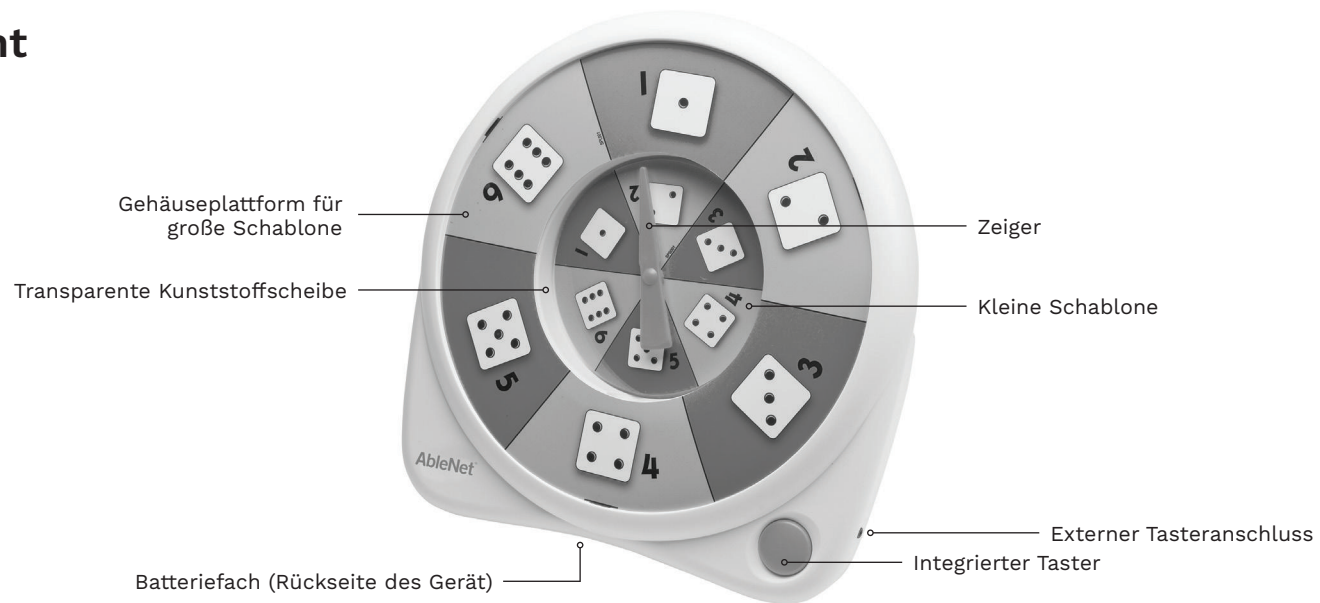



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

All-Turn-It® Spinner

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:51 PM

Para empezar:

1. Inserte dos pilas C alcalinas en el compartimento de las pilas.
2. Quite el disco de plástico transparente y la flecha.
3. Sitúe la lámina superpuesta pequeña sobre la rueda de plástico de la ruleta.
4. Vuelva a instalar la flecha y el disco de plástico transparente.
5. Coloque la lámina superpuesta grande sobre el dispositivo, introduciendo las tres lengüetas en sus ranuras correspondientes.
6. Sus dispositivos ya están listos para usar. Gire la flecha y la lámina superpuesta pequeña activando el interruptor incorporado o un interruptor externo enchufado al conector de la parte lateral del dispositivo.



ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

3 Descripción general del dispositivo

