


### Safety recommendations

- Read the Instructions for use carefully (find this at: [www.lopital.com](http://www.lopital.com)) before use.
- Maximum load 220 kg.
- Make sure that the chair is on the brake during client transfers from and to the device.
- Place both feet on the foot supports.
- Armrests are closed during up / down movements and arms should rest on armrest.
- Only relocate and move the chair in the lower position.

### Operation panel

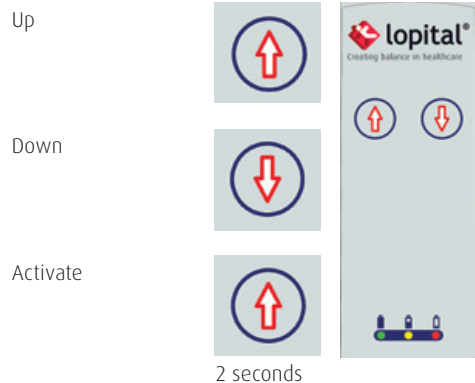

### Important!

This instruction card may not be considered a replacement for the Instructions for use.



### Use


1. Activate the Elexo XXL by pressing the 'up' button for 2 seconds.  
Note: After use, the Elexo XXL will go into a sleep setting after 60 minutes.
2. Place the chair in the right position and fold the foot supports up.
3. Apply the brake to the chair!
4. Fold the armrests up if necessary.
5. Support the less able person when they are taking a seat.
6. Shut the armrests and let the client's feet rest on the foot plates.

Stand up by carrying out the same procedure in reverse order.

### Wheel blocking



### Directional / braked wheel

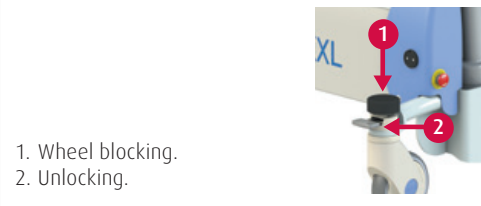

### Foot rest

Both foot plates must be turned away for the less able person to take a seat in the chair. Make sure that the person places both feet on the foot plates when the chair is moving.



### Armrest

1. Unlocking.
2. Turn backwards.  
Close by repeating process in reverse order.



### Charging batteries

After using the Elexo XXL, connect it to the charger to maintain the batteries.



- Off
- Green
- Blinking orange
- Orange
- Blinking red
- Red
- Sleep setting.
- Chair ready to use.
- Emergency stop activated.
- Battery is half empty.
- Battery almost empty.
- Battery empty.


**The Elexo XXL will not work during charging.**

### Toilet function

- *In combination with toilet:* The Elexo XXL can be moved over almost every toilet. Move the chair upwards or downwards to achieve the right position.
- *With bedpan:* The Elexo XXL can also be used as a toilet chair. Simply slide the stainless steel / plastic bedpan under the chair using the guides.

### Emergency lowering

If the Elexo XXL breaks down, you can lower the chair using the emergency lowering button.

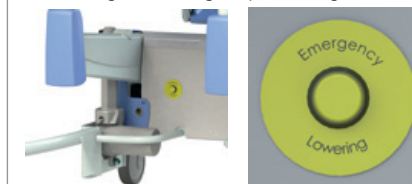

### Cleaning and maintenance

The Elexo XXL must be cleaned after every use, with water and regular household cleaning agents. Do not use any abrasive or other aggressive cleaning products. Check the wheels regularly for hairs, dust and soap residues and remove when necessary.

### Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 220kg
- Achten Sie darauf, dass die Feststellbremsen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Armstützen beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armstützen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.

### Bedienung

Anheben



Absenken



Aktivieren



2 Sekunden

### Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.



### Gebrauch

1. Aktivieren Sie den Elexo XXL Stuhl indem Sie den Anhebeknopf 2 Sekunden gedrückt halten. Achtung: Nach Gebrauch geht der Elexo XXL Stuhl innerhalb von 60 Minuten in den Schlafstand über.
2. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
3. Arretieren Sie den Stuhl!
4. Klappen Sie die Armlehnen bei Bedarf nach oben.
5. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
6. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Rollenblockierung

1. Rollenblockierung.
2. Entriegeln.




### Lenkrolle / Rolle mit Feststellbremse

1. Rollenblockierung.
2. Entriegeln.



### Fußstütze

Beide Fußstützen müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

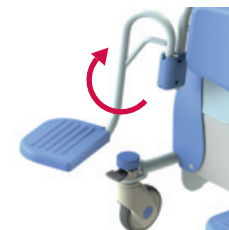

### Armlehne

1. Entriegeln.
2. Nach hinten drehen. Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



### Batterie aufladen

Schließen Sie den Elexo XXL Stuhl nach dem Gebrauch an den Lader an, um die Batterien zu schonen.



- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Aus           | Schlafstand.                          |
| Grün          | Stuhl betriebsbereit.                 |
| Blinkt orange | Notabschaltvorrichtung ist aktiviert. |
| Orange        | Batterie ist halb leer.               |
| Blinkt rot    | Batterie fast leer.                   |
| Rot           | Batterie leer.                        |


**Während des Ladens funktioniert den Elexo XXL Stuhl nicht.**

### Toilettenfunktion

- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Elexo XXL Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *Mit Behälterführung:* Der Elexo XXL Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoffbehälter unter den Stuhl.

### Notabsenkung

Bei einem Funktionsausfall kann der Elexo XXL Stuhl mithilfe der Notabsenkung abgesenkt werden.

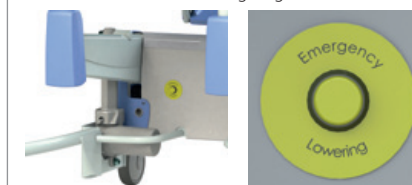

### Reinigung und Wartung

Der Elexo XXL Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Kontakt auf.

**Tel:** +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301  
**E-mail:** [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

### Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)