


Manuel d'utilisation – Français


Manual de usuario – Español

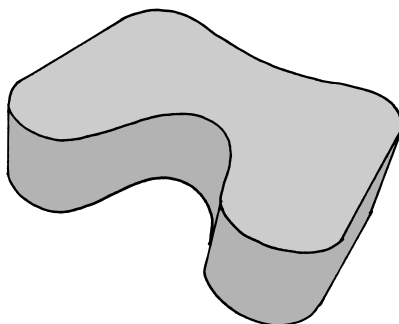

REF

8090

8095

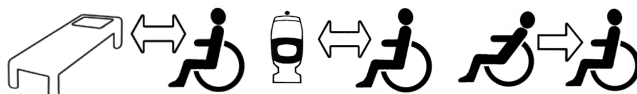

SWL: 200 kg/440 lbs

FootStool is used to raise the position of the knees and thereby enable safer, easier bed-to-wheelchair transfer in a seated position. FootStool also provides good support under the feet during visits to the toilet, or when repositioning farther back in a chair. FootStool is made of a material with closed cells, which makes it easy to keep clean.



Check Safety

Visual inspection


Check the condition and function of the assistive device regularly.



Always read the user manual

Always read the user manuals for all assistive devices used during a transfer. Keep the user manual where it is accessible to users of the product. Always make sure that you have the right version of the user manual. The most recent editions of user manuals are available for downloading from our website



Placement of FootStool

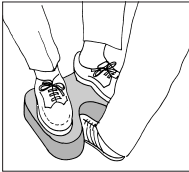

Place the FootStool under the user's feet when the user is sitting on the toilet or in a wheelchair. FootStool is recessed at the front to allow the caregiver to place a foot as close as possible to the stool. The back also has a small recess to facilitate placement close to the toilet.

Using FootStool

FootStool complements other assistive devices such as EasyBelt/FlexiBelt, EasyGlide and SitWalk to facilitate transfers between two locations or for repositioning, for example, farther back in a chair. Since the knees are raised, the thighs are also lifted somewhat, which reduces friction and makes the transfer easier.

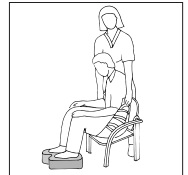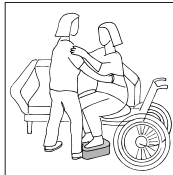

Material

Polyethylen

Care of the product

The surface of the product can be cleaned with warm water or a soap solution. If disinfection is needed, 70 % ethanol, 45 % isopropanol or similar should be used.

Note: Do not subject the product to hard pressure or impact. This may leave indentations in the material.



Medical Device Class I

Medical Device Class I. The product complies with the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

Expected lifetime

Up to 10 years of normal use

FootStool sert à relever la position des genoux, pour obtenir un transfert plus sûr et plus facile en position assise entre lit et fauteuil roulant. Donne également un bon appui sous les pieds pendant le passage aux toilettes ou pour déplacer la personne plus en arrière sur le fauteuil. FootStool est fabriqué dans un matériau à pores fermées, ce qui permet de le garder hygiénique et propre.



Contrôle de sécurité

Inspection visuelle


Effectuer des inspections régulières de l'auxiliaire.



Toujours lire le manuel utilisateur

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert d'utilisateur. Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet


Mise en place de FootStool

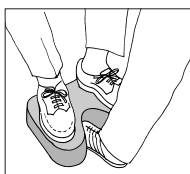

Placer FootStool sous les pieds de l'utilisateur pendant que celui-ci est assis aux toilettes ou sur son fauteuil roulant. Sur l'avant de FootStool, une échancrure permet à l'assistant de placer son pied aussi près que possible. Sur l'arrière, une petite échancrure sert au positionnement près des toilettes.

Utilisation de FootStool

FootStool complète d'autres auxiliaires comme EasyBelt/FlexiBelt, EasyGlide et SitWalk pour faciliter les déplacements entre deux unités ou le positionnement, par exemple, plus en arrière sur le fauteuil. Puisque les genoux sont relevés, les cuisses se décolent également du support, ce qui réduit la friction et facilite le déplacement.

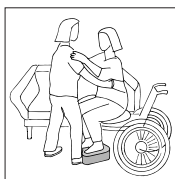

Matériaux

Polyéthylène

Conseils d'entretien

La surface du produit peut être nettoyée avec de l'eau chaude ou une solution savonneuse. Si une désinfection est nécessaire, de l'éthanol à 70 %, de l'isopropanol à 45 % ou un produit équivalent peut être utilisé.

Remarque: Ne pas soumettre le produit à des pressions trop fortes ou trop ponctuelles. Cela pourrait laisser des marques sur le matériau.



Dispositif médical de classe I

Le produit répond aux exigences de la directive 93/42/CEE du Medical Devices.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local.

Durée de vie estimée de produit

Jusqu'à 10 ans en utilisation normale.

El FootStool se usa para alzar las rodillas y lograr así un traslado más seguro y sencillo entre la cama y la silla de ruedas en posición sentada. El FootStool ofrece también un apoyo adecuado bajo los pies durante las visitas al aseo y al recolocar hacia atrás en una silla. El FootStool está fabricado en un material de celdas cerradas, lo que facilita su limpieza.



Inspección operacional

Inspección visual


Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia.



Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web:



Colocación del FootStool

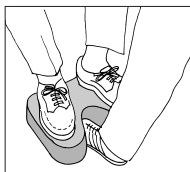

Sítúe el FootStool bajo los pies del usuario con este sentado en el inodoro o en una silla de ruedas. El FootStool presenta un hueco en la parte delantera para que el asistente pueda colocar un pie lo más cerca posible de la banqueta. El dorso contiene también un pequeño hueco para facilitar una posición ajustada al inodoro.

Uso del FootStool

El FootStool sirve de complemento de otros dispositivos de asistencia, tales como EasyBelt/FlexiBelt, EasyGlide y SitWalk, para facilitar el traslado entre dos ubicaciones o para recolocar, por ejemplo, más atrás en una silla. Al alzar las rodillas se levantan también ligeramente los muslos, lo que disminuye la fricción y simplifica el traslado.

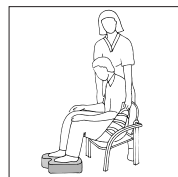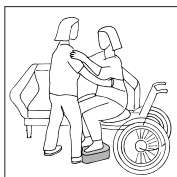

Material

Polietileno

Cuidado del producto

La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o con una solución de jabón. Si es necesaria la desinfección, se debería utilizar etanol al 70 %, isopropanol al 45 % o similar.

¡Atención! No someta el producto a fuertes presiones ni impactos. Ello podría producir mellas en el material.



Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
8090	FootStool	320 x 380 x 100 mm / 12.5 x 14.9 x 3.9"	
8095	FootStool	320 x 380 x 50 mm / 12.5 x 14.9 x 1.9"	

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.

